

PINCES D'EXTRACTION





Les pinces d'extraction d'American Eagle Instruments®, dotées de manches ergonomiques à poids réduit et d'une surface lisse et mate, sont particulièrement faciles à nettoyer.


Les pinces d'extraction standard sont dotées d'un bec anatomique et d'un profil adhésif pour **une bonne prise en main**. Elles s'utilisent sans grand effort. Un disque en téflon dans la fixation de l'instrument assure la facilité de mouvement et prévient la corrosion.

La gamme comprend également des pinces spéciales :

Pince à préhension profonde : pince d'extraction profonde avec des becs de pince légèrement aiguisés, allongés et effilés vers la pointe. Elles permettent une mise en place sous-gingivale et répartissent la pression sur une plus grande surface de la couronne et de la structure radiculaire, souvent déjà affaiblies.

Pince pour l'extraction des racines et des racines résiduelles : grâce à sa forme, la pince de Witzel courbée en S peut être utilisée de manière presque universelle. **Une seule pince à racine pour tous les quadrants !** Le bec prolongé de la pince, qui se rétrécit vers l'extrémité, est diamanté pour assurer une prise sûre, même avec des résidus radiculaires très fins.

Trois autres variantes sont également disponibles avec des mâchoires ou des lames extra-affûtées qui garantissent une bonne prise : pour l'élimination particulièrement exigeante des résidus de racines en profondeur dans l'alvéole (AESRFLO, AESRFUN, AESRFUP).

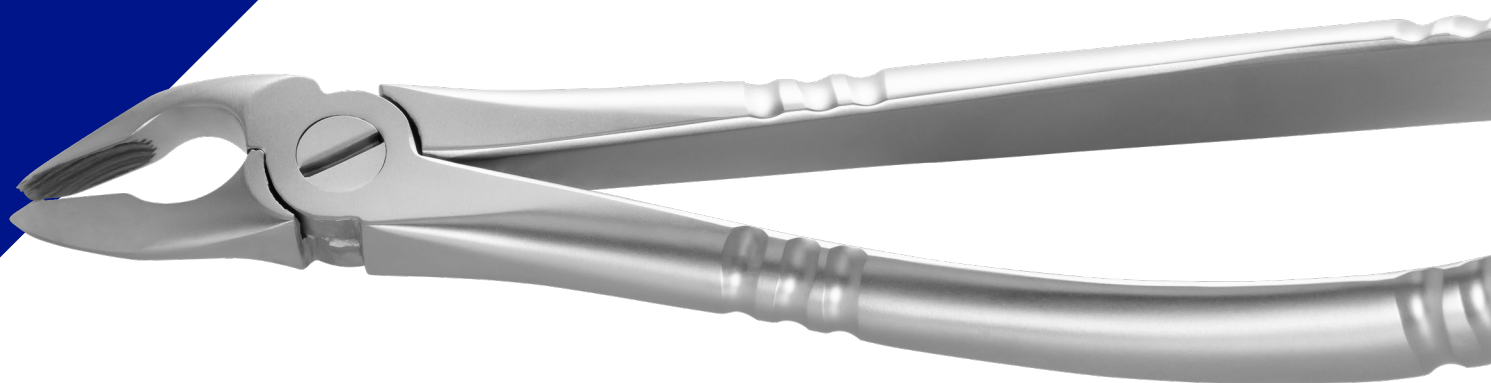

AESEFSET	<p>Jeu de pinces d'extraction standard</p> <p>Jeu de pinces d'extraction standard, comprenant 10 pinces : pour les incisives et canines supérieures, pour les prémolaires supérieures, pour les molaires supérieures droites, pour les molaires supérieures gauches, pour les dents de sagesse supérieures, pour les racines supérieures, pour les canines et prémolaires inférieures, pour les molaires inférieures des deux côtés, pour les racines inférieures et pour les dents de sagesse inférieures</p> <p>(AESEFCUI, AESEFCUP, AESEFCLI, AESEFCURM, AESEFCULM, AESEFCLM, AESEFCLR, AESEFCUR, AESEFCU3M, AESEFCL3M)</p>
-----------------	---

AESEFUI	Pince à préhension profonde pour l'extraction de l'incisive supérieure	AESEFCURM	Pince d'extraction standard n° 17 pour molaires supérieures droites
AESEFUC	Pince d'extraction des canines et prémolaires supérieures à prise profonde	AESEFCULM	Pince d'extraction standard n° 18 pour molaires supérieures gauches
AESEFLCP	Pince à préhension profonde pour l'extraction des canines et prémolaires de la partie frontale inférieure	AESEFCLM	Pince d'extraction standard n° 22 pour molaires inférieures
AESEFR	Pince à préhension profonde pour l'extraction des racines basses et des incisives étroites	AESEFCLR	Pince d'extraction standard n° 33 pour racines inférieures
AESEFUM	Pince à préhension profonde pour l'extraction des molaires supérieures et des dents de sagesse	AESEFCUR	Pince d'extraction standard n° 51A pour racines supérieures
AESEFLM	Pince à préhension profonde pour l'extraction des molaires inférieures et des dents de sagesse	AESEFCU3M	Pince d'extraction n° 67A avec profil antidérapant pour dents de sagesse supérieures des deux côtés
AESEFRW	Extraction radiculaire universelle de Witzel Pince diamantée	AESEFCL3M	Pince d'extraction n° 79 avec profil antidérapant pour dents de sagesse inférieures des deux côtés
AESEFCUI	Pince d'extraction standard n° 2 pour incisives et canines supérieures	AESRFLO	Pince radiculaire - inférieure
AESEFCUP	Pince d'extraction standard n° 7 pour prémolaires supérieures	AESRFUN	Pince radiculaire - universelle
AESEFCLI	Pince d'extraction standard n° 13 pour incisives inférieures, canines et prémolaires	AESRFUP	Pince radiculaire - supérieure