

THE GOLD RUR C



American Eagle
INSTRUMENTS®



Microchirurgie

Vos avantages

- Surface mate réduisant les reflets lumineux gênants
- Contrôle optimal
- Précision de manipulation
- Prise en main confortable


Microchirurgie.....4-6

Microchirurgie

Porte-aiguille Microscopique

AESMSNH

Aucune séparation ou coincement accidentel du matériel de suture n'est possible. Compatible avec des sutures de calibre 5/0 à 7/0. Manches ronds avec une prise en main particulièrement agréable pour une maniabilité précise maximale et un confort optimal lors des sutures microchirurgicales. Mécanisme de verrouillage souple. Le revêtement diamanté assure une excellente tenue et une usure minimale. Aucune arête vive, notamment au niveau de la charnière torsadée et des extrémités actives.

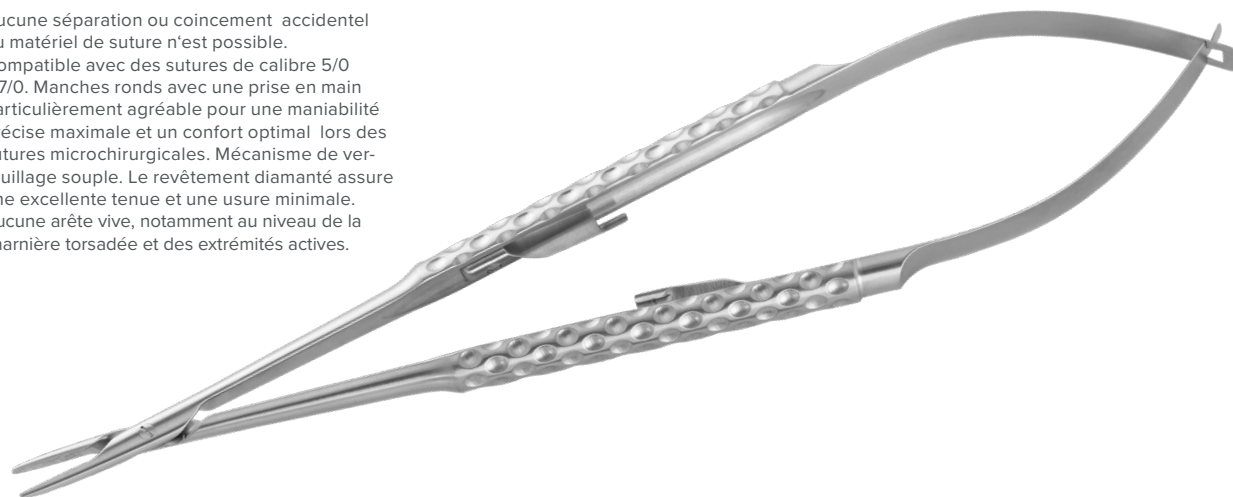

Micro-ciseau SuperCut, micro-dentelés

AESMSSM

Pour le traitement des tissus mous, le retrait des sutures et les interventions microchirurgicales. Manches ronds avec une prise en main particulièrement agréable pour une maniabilité précise maximale et un confort optimal. Grâce à l'affûtage SuperCut de la lame supérieure, les coupes sont aussi souples et précises qu'avec un scalpel. La seconde lame est microdentée et favorise une prise sûre des tissus mous ainsi que du matériel de suture. De par la lame SuperCut, aussi tranchante qu'un rasoir, l'effilochage des tissus est évité.




La finition mate de l'instrument réduit les reflets lumineux gênants

De la chirurgie cardiovasculaire à la microchirurgie dentaire - une précision qui fait référence.

Notre gamme ciblée, comprenant les instruments essentiels en microchirurgie dentaire, offre des outils d'une finesse extrême, pour des interventions atraumatiques et une préservation maximale des tissus mous.

Le confort du praticien et bien-être du patient ont été au cœur du développement de cette gamme. C'est pourquoi nous intégrons des fonctionnalités innovantes et des matériaux de la plus haute qualité, tels que des mors diamantés pour une prise en main sûre, ou des micro-ciseaux SuperCut qui minimisent l'effilochage des tissus mous.

Microchirurgie

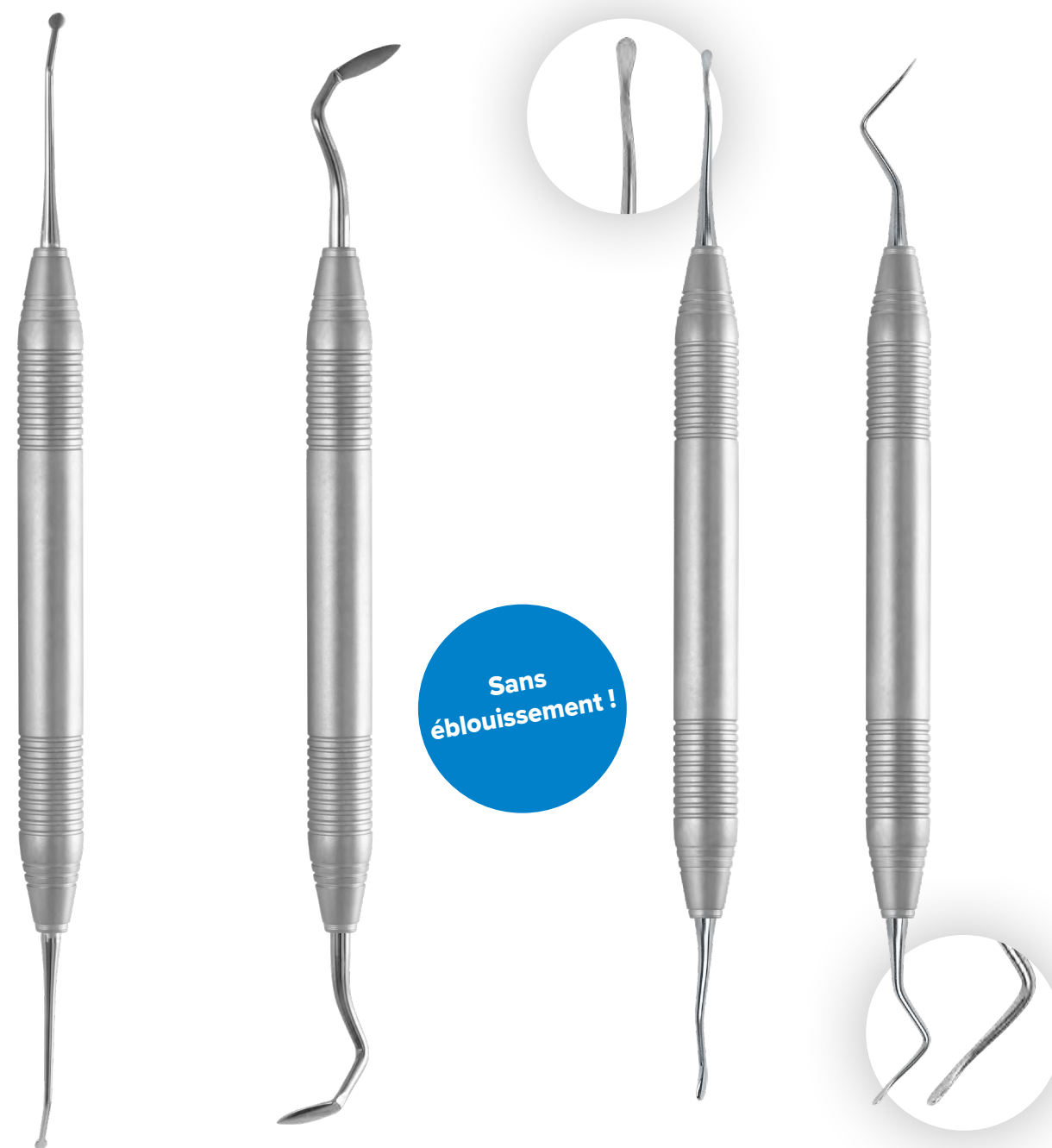

Élévateur à papilles

AESMSPE

Ce raspatoire/élévateur particulièrement délicat pour la mobilisation de la papille, convient également très bien à la mobilisation initiale lors d'autres interventions implantologiques/micro-chirurgicales et lors du traitement des tissus mous.

Couteau parodontal Orban 1-2

AESMSKO

Les lames courbées permettent un bon accès aux zones postérieures et interdentaires.

Couteau de tunnelisation 1

AESMST1

Les deux instruments de tunnelisation minimisent le risque de perforation lors de la formation de lambeaux fendus vestibulaires. Leurs extrémités actives sont en forme de cuillère, légèrement incurvées, ce qui facilite la préparation dans les zones anatomiques convexes.

Couteau de tunnelisation 2

AESMST2

Le manche ergonomique offre un confort maximal et un contrôle précis de la force appliquée. La finition mate réduit les reflets lumineux indésirables.

Microchirurgie



**Porte-lame microchirurgical
AESMSSHM**

Manche rond offrant un toucher particulièrement agréable, pour un guidage extrêmement précis et un confort maximal lors des interventions microchirurgicales dentaires et de la gestion des tissus mous. Le manche rond permet de réajuster l'angle de coupe selon la situation clinique.

**Pince microchirurgicale
AESMSSTT**

Pince microchirurgicale avec 1 x 2 petites dents, pour la saisie, la mobilisation et le maintien précis des tissus mous pendant la suture.

**Micropince atraumatique
Micro Cooley
AESMSTCO**

La surface microtexturée des mors de la pince répartit la pression sur une grande surface et assure une tenue sûre et douce même des tissus les plus délicats.

**Pince à suture microchirurgicale
AESMSSTD**

Fabriquée avec précision pour une prise en main sûre. Sans arêtes vives, aucun risque de couper accidentellement le matériel de suture. Offre un guidage précis et un confort maximal.

Les manches ronds des pinces et du porte-lame microchirurgical assurent une prise en main confortable et optimale, pour un guidage précis et un confort supérieur.



Instruments chirurgicaux

Vos avantages

- Matériaux de haute qualité
- Surface instrumentale mate optimisée
- Manche ergonomique
- Fabriqué en Allemagne

Diagnostic	8
Décolleurs.....	9-10
Curettes Lucas	11
Pinces.....	12-15
Pinceshémostatiques.....	16
Ciseaux	17-19
Porte-aiguilles.....	20-23
Ciseaux à os	24
Pinces gouges.....	25
Écarteurs	26-28
Matériaux d'affûtage	29
Daviers.....	30-33
Pince à fragments radiculaires	34-35
Périotomes	36-37
Élévateurs.....	38-39
Cassettes à instruments.....	40-41

Diagnostic



**Manche à miroir buccal
AESH51**

Compatible aux miroirs buccaux standards à filetage métrique (filetage européen).

(Ne comprend pas le miroir)



**Manche à miroir buccal
avec graduation Endo
(0-30 mm)
AESH51E**

Le manche à miroir ergonomique est compatible aux miroirs buccaux standards à filetage métrique (filetage européen). Il est doté d'un marquage endodontique facile à lire de 0 à 30 mm à l'extrémité opposée du manche.



**Manche à lame de
bistouri
AESSH5**

Le manche rond ergonomique offre un confort maximal pour les coupes les plus diverses et permet un réajustement facile. Les stries du manche, faciles à nettoyer, assurent une prise en main sûre et une transmission optimale de la force. Sa surface de préhension mate réduit les reflets lumineux gênants.



**Sonde parodontale
UNC 15
AESPUNC15**

University of North Carolina 1-15 mm, marquage de 1 mm

Convient aux mesures/évaluations simples, telles que distances entre implants, les longueurs de couronnes, l'épaisseur osseuse, etc.



**Porte tampon
Luniatzschek
AESGP**

Pour une mise en place facile des bandelettes/tampons. Sa surface de préhension mate réduit les reflets lumineux gênants.

Décolleurs

Manches
ergonomiques
arrondis pour
une transmission
directe et maîtrisée
de la force



**Décolleur
Glickmann 24 GSP
AESPGSP**

Le décolleur selon Glickmann est doté d'une extrémité effilée et tranchante en forme de spatule d'un côté, et d'une lame triangulaire affûtée de l'autre. L'extrémité fine permet de soulever le lambeau au niveau marginal. L'extrémité triangulaire est idéale pour la dissection précise des papilles.



**Décolleur Goldmann
Fox 14
AESPGF14**

Le décolleur selon Goldmann Fox est un instrument à double extrémité en forme de lance et d'une extrémité tranchante d'un côté et une spatule plus large, également affûtée de l'autre. Il est utilisé pour décoller, refouler et maintenir le lambeau mucopériosté après une incision gingivale.



**Décolleur Buser
AESPB**

Le décolleur selon Buser est un instrument à double extrémité en forme de lance et d'une extrémité arrondie. L'extrémité en lance est conçue pour séparer les papilles et le rebord gingival marginal. Le soulèvement atraumatique du lambeau mucopériosté se poursuit avec l'extrémité arrondie, respectueuse des tissus.



**Décolleur
Molt 10
AESPM**

Le décolleur selon Molt est un instrument à double extrémité, doté de deux parties actives en forme de cuillère, de tailles différentes et affûtées. Il est utilisé pour détacher, repousser et maintenir le lambeau mucopériosté après une incision gingivale.



**Décolleur
Molt 9
AESPM9**

Une extrémité effilée permet le décollement délicat du périoste, tandis que l'extrémité plus large et légèrement arrondie facilite une préparation tissulaire efficace ainsi que la rétraction douce des tissus mous.

Décolleurs

Curettes Lucas

L'extrémité arrondie et tranchante est conçue pour le décollement de la papille ou du lambeau.

Décolleur Prichard PR-3 AESPPR3S

Le décolleur selon Prichard est un instrument polyvalent, combinant fonctions de décollement et de rétraction. Il est utilisé aussi bien en chirurgie parodontale qu'en ostéotomie ou en résection apicale.

L'écarteur est émoussé et s'utilise pour l'écartement des lambeaux lors des traitements parodontaux. Grâce à sa surface hautement polie, il peut également servir de miroir-raspatoire.

Décolleur Allen AESPP9PA

Le décolleur P9/PA est un instrument à double extrémité, avec une spatule large et tranchante d'un côté, et une extrémité en forme de goutte également affûtée de l'autre. Il permet de détacher, de replier et de maintenir le lambeau mucopériosté après une incision gingivale.

Décolleur Williger AESPWIO6

Le décolleur selon Williger est un instrument à une seule extrémité, doté d'une lame longue, fine, courbée et affûtée. Son manche plat, légèrement strié, assure un excellent contrôle et un positionnement précis de la lame lors de l'intervention.

Curette chirurgicale Lucas 2,0 mm AESCLU11

Curette chirurgicale Lucas 2,5 mm AESCLU22

Curette chirurgicale Lucas 3,0 mm AESCLU33

Lors de la sélection des décolleurs périostés, diverses exigences cliniques ont été prises en compte, telles que la préparation du lambeau mucopériosté, l'incision initiale et le soulèvement papillaire. Les extrémités actives, coupantes, sont fabriquées en acier chirurgical spécialement trempé pour une durabilité accrue et sont disponibles en différentes combinaisons. Les stries sur le manche, faciles à nettoyer, assurent une prise en main sûre et un transfert maximal de la force. Enfin, la surface mate réduit les reflets lumineux gênants.

La curette Lucas, également connue sous le nom de grattoir Lucas, se distingue par la précision de ses extrémités. Elle a été conçue pour le curetage osseux, le débridement de l'alvéole post-extractionnelle ainsi que l'élimination des kystes. Le manche ergonomique permet un confort maximal ainsi qu'une transmission directe et maîtrisée de la force.

Pinces (anatomiques)

En fonction de l'application et des adaptations fonctionnelles spéciales, on distingue 3 catégories de pinces : les pinces anatomiques, chirurgicales et atraumatiques.



Pince anatomique Adson à tissu
AESSTADS
droite, 12 cm

Pince anatomique, dite "pince à pouce". Pour saisir et mobiliser les tissus mous, mais aussi pour le maintien précis lors de la suture. Les extrémités de travail non dentées réduisent le traumatisme tissulaire.



Pince anatomique Semken à tissu
AESSTSEMS
droite, 15 cm

Pince anatomique pour saisir et mobiliser les tissus mous, ainsi que pour le maintien précis lors de la suture. Les extrémités de travail non dentées réduisent le traumatisme tissulaire.



Pince anatomique Semken à tissu
AESSTSEMC
courbée, 15 cm

Pince anatomique pour saisir et mobiliser les tissus mous, ainsi que pour le maintien précis lors de la suture. Les extrémités de travail non dentées réduisent le traumatisme tissulaire. Pince légèrement courbée pour un meilleur accès aux endroits difficiles d'accès.



Pince chirurgicale Adson à tissu
AESSTADTS
1×2 dents, 1,2 mm, 15 cm
Également appelée « pince à pouce ».



Pince chirurgicale Semken à tissu
AESSTSEMTS
1×2 dents, droite, 15 cm




Pince chirurgicale Semken à tissu
AESSTSEMTS
1×2 dents, courbée, 15 cm
Pince légèrement courbée qui facilite l'accès aux zones difficiles.

Les pinces anatomiques sont utilisées en odontologie pour la fixation atraumatique et la manipulation des tissus mous. Leurs extrémités striées assurent une prise ferme sans blesser ni comprimer les tissus.

Les pinces chirurgicales sont des instruments précis permettant la manipulation sûre des tissus, du matériel de suture ou de petites structures lors d'interventions chirurgicales dentaires. Leur design ergonomique permet une application contrôlée.

Pinces (atraumatiques)


Pinces

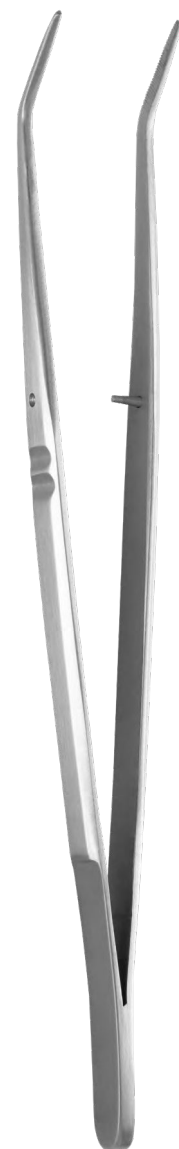**Pince London-College**

AESCT10

manche lisse

Pince multifonction London-College. Avec tige de guidage. Particulièrement facile à nettoyer et à reconditionner. Convient à de nombreuses applications.

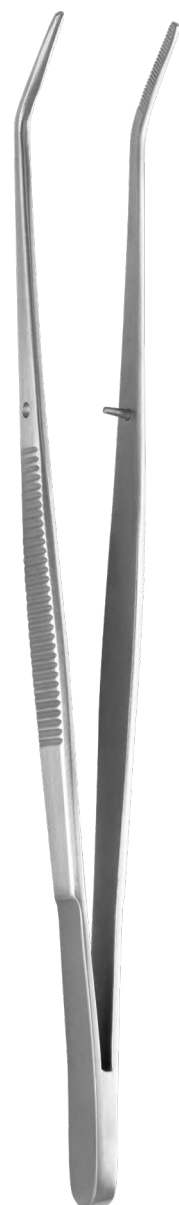**Pince London-College**

AESCT5

manche strié

Pince multifonction London-College. Avec tige de guidage et manche strié pour une prise en main particulièrement sûre. Convient à de nombreuses applications.

**Pince anatomique à tissu**

AESSTS

étroite, droite, 14,5 cm

Pince multifonction. Convient à de multiples usages, tels que la manipulation des tissus mous, le positionnement ou le déplacement de tissus, de tampons, de membranes, et bien plus.

**Pince anatomique De Bakey à tissu**

AESSTDBS

1,5 mm, droite, 15 cm

Pince atraumatique : les stries à l'extrémité de la pointe permettent une large répartition de la pression, assurant une prise des tissus à la fois sûre et délicate.

**Pince Korn à suture**

AESSTCP

1,3 mm, en angle, 15,5 cm

Pour une stabilisation sûre du lambeau de tissu lors de la suture.

Les pinces atraumatiques, comme celles de De Bakey, sont des instruments chirurgicaux spécialement conçus pour la dentisterie et la chirurgie orale. Elles permettent de saisir, de maintenir ou mobiliser les tissus mous en douceur, sans les comprimer ni les endommager. Elles préservent les tissus sensibles et favorisent ainsi une cicatrisation plus rapide.

Saisie sûre
et douce des
tissus mous

Pinces hémostatiques

Ciseaux



Pince hémostatique Halsted-Mosquito
AESCHMC
courbée, 14 cm
Extrémité de travail courbée.




Pince hémostatique Micro-Mosquito
AESCMMOC
courbée, 12 cm
Extrémité de travail courbée.

Minimise les traumatismes tissulaires

Pince hémostatique Micro-Mosquito
AESCMMOS
droite, 12 cm
La pince hémostatique Micro-Mosquito convient au clampage des plus petits vaisseaux. Grâce au striage transversal précis et fin, le vaisseau est protégé des blessures. Les extrémités raccourcies offrent au praticien un contrôle maximal, notamment lors d'interventions de chirurgie dentaire très délicates et sensibles.

Les pinces finement fabriquées sont dotées d'un mécanisme de verrouillage particulièrement précis. Cela permet de s'assurer que les fines dentelures des extrémités de travail se ferment correctement pour arrêter le saignement et minimiser le traumatisme des tissus.

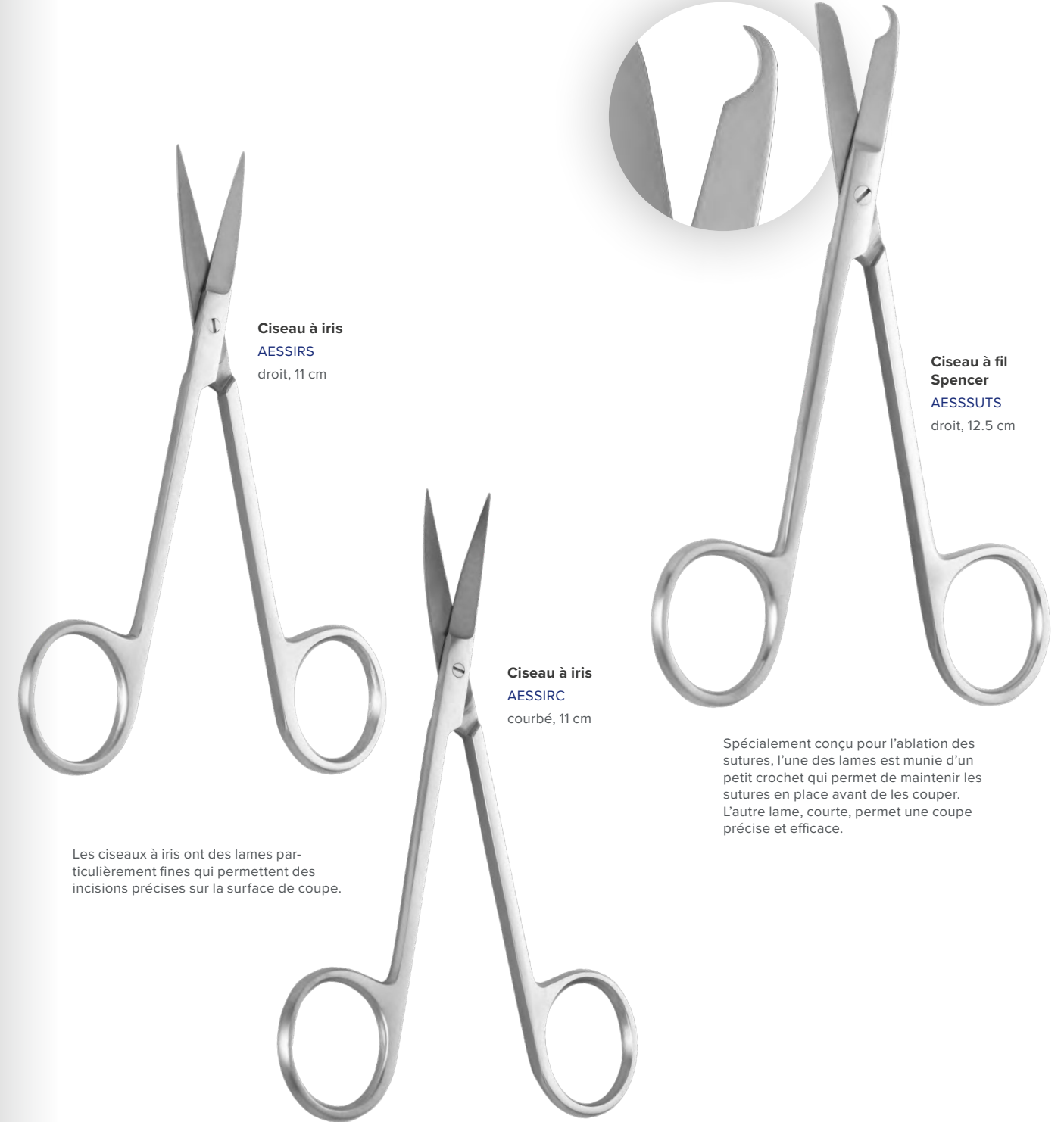

Ciseau à iris
AESIRS
droit, 11 cm

Ciseau à iris
AESIRC
courbé, 11 cm

Ciseau à fil Spencer
AESSUTS
droit, 12,5 cm

Spécialement conçu pour l'ablation des sutures, l'une des lames est munie d'un petit crochet qui permet de maintenir les sutures en place avant de les couper. L'autre lame, courte, permet une coupe précise et efficace.

Les ciseaux à iris ont des lames particulièrement fines qui permettent des incisions précises sur la surface de coupe.

Nos ciseaux offrent une précision extrême et sont fabriqués selon les plus hauts standards de l'artisanat chirurgical. Leur finition soignée, associée à une articulation à légère flexibilité, garantit des coupes précises et nettes sur toute la longueur des lames.

Ciseaux SuperCut

Ciseaux SuperCut



Ciseau La-Grange, en forme de S, SuperCut
AEESLGSC

La courbe en S du ciseau La-Grange épouse idéalement l'anatomie buccale, ce qui facilite la dépose des sutures dans les zones difficiles d'accès.



Ciseau à iris SuperCut
AEESIRSSC

droit, 11 cm

Initialement conçu pour l'ophtalmologie, les ciseaux à iris sont dotés de lames particulièrement fines.



Lames courtes
et fines aux
extrémités
arrondies



Ciseau à dissection Metzenbaum SuperCut
AEESMETSSC

courbé, 14 cm

Minimise le risque de lésions involontaires des tissus mous, notamment dans les zones difficiles d'accès.



Ciseau ultra fin SuperCut
AEESUFSC

12 cm

Le ciseau ultra-fin American Eagle réunit le meilleur de deux mondes : la précision d'un micro-ciseau et la maniabilité familière d'un ciseau standard. Grâce à ses extrémités de travail ultra-fines, il permet d'effectuer des coupes tissulaires aussi précises qu'avec un micro-ciseau.



Ciseau Goldmann-Fox SuperCut
AEESGFSSC

droit, 13 cm



Ciseau Goldmann-Fox SuperCut
AEESGFCSC

courbé, 13 cm

Les ciseaux Goldman-Fox ont été spécialement conçus pour la chirurgie dentaire. Ils sont dotés de lames finement usinées à l'extrémité et d'une section robuste à l'arrière du tranchant, ce qui permet d'utiliser la pointe avec une précision maximale dans les endroits les plus difficiles d'accès.



Ciseaux SuperCut : La finition spécifique des lames permet des coupes d'une finesse, netteté et précision comparables à celle obtenues avec un scalpel. La contre-lame, micro-dentée, assure une prise fiable des tissus mous ainsi que du matériel de suture. Et la lame SuperCut, d'un tranchant rasoir, préserve l'intégralité du tissu mou, évitant tout effilochement et permet une conturation précise et atraumatique.

Conseil : Toujours nettoyer et stériliser les ciseaux en position ouverte.

Porte-aiguilles

Porte-aiguilles



Les aiguilles chirurgicales modernes sont particulièrement dures et exigent une grande résistance des instruments. Les porte-aiguilles American Eagle sont renforcés par des inserts en carbure de tungstène. Ce matériau fritté présente une usure minimale et résiste à tous les types de retraitement courants.

Les inserts sont finement striés afin d'assurer un positionnement précis des aiguilles ainsi qu'un maintien sûr et fiable.

Les porte-aiguilles avec inserts en carbure de tungstène TC sont reconnaissables à leurs manches dorés.

Ils sont exempts d'arêtes vives, notamment au niveau de la charnière et des bords. Le fil peut glisser librement sur l'instrument, ce qui prévient efficacement tout risque de sectionnement accidentel ou de coincement lors de la suture ou du nouage.

Porte-aiguilles


Porte-aiguilles



**Porte-aiguille
Crile Wood TC**
AESNCWTC
Convient aux aiguilles
de calibre : 4/0-6/0.
15 cm



**Porte-aiguille
Modèle suédois
Micro TC**
AESNHSWE
Convient aux aiguilles
de calibre : 5/0-6/0.
15 cm

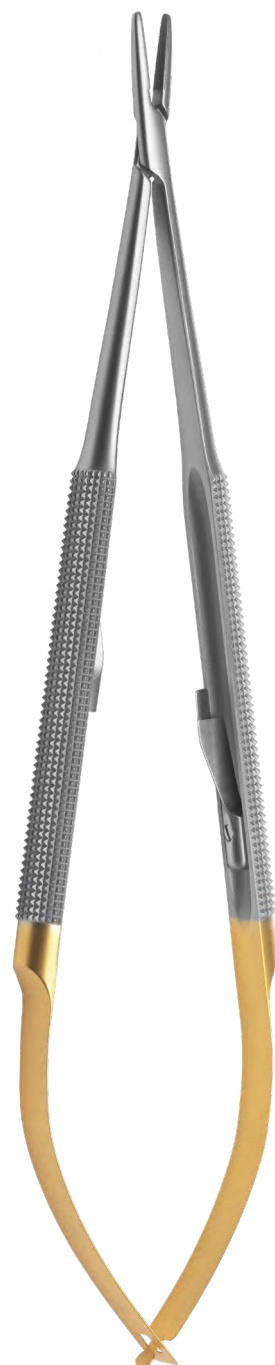

**Porte-aiguille
Macro TC**
AESNHMACS
Convient aux aiguilles
de calibre : 3/0-5/0.
18 cm

Mécanisme de verrouil-
lage particulièrement
fluide.

**Porte-aiguille
Castroviejo Micro TC**
AESNHBA
Convient aux aiguilles
de calibre : 5/0-7/0.
18 cm

Mécanisme de verrouillage
particulièrement fluide.

Manche rond
pour une
manipulation
ultra-précise
et un contrôle
optimal



**Porte-aiguille
Micro TC**
AESNHBAC
Convient aux aiguilles
de calibre : 5/0-7/0.
18 cm

Courbé pour un meilleur accès
postérieur.

Mécanisme de verrouillage
particulièrement fluide.

Ciseaux à os

Pinces gouges



Ciseau à os Rhodes Back Action
AESRCBA

Ciseau à os destiné à la mise en forme de la mâchoire, mais également adapté au prélèvement de matériau osseux autologue. Les bords particulièrement tranchants permettent une utilisation même dans les zones très difficiles d'accès.

Les ciseaux à greffe osseuse selon Buser sont conçus pour le prélèvement de matériau osseux autologue. La courbure spéciale des extrémités de travail assure une efficacité maximale tout en permettant un excellent contrôle visuel de la quantité d'os prélevée. Les deux bords externes sont arrondis afin de minimiser les traumatismes, évitant ainsi des encoches profondes. Manche ergonomique pour un contrôle maximal et une transmission de force efficace.



Ciseau à greffe osseuse Buser 1
AESBS1
3 mm / 5 mm



Ciseau à greffe osseuse Buser 2
AESBS2
4 mm / 5 mm



Pince Mini-Friedmann
AESBRFRIEM

Les pinces gouges Mini-Friedmann, particulièrement fines, sont utilisées pour le contournement des os et des tissus grossiers.



Pince gouge Friedmann
AESBRFRIE

Les lames fines et précises assurent une utilisation contrôlée et fluide. Selon l'indication clinique, une version standard ainsi qu'une version extra fine sont disponibles. Cela permet non seulement de sculpter l'os, mais aussi de prélever des fins copeaux osseux.

Écarteurs

Écarteurs



Écarteur Middeldorpf 1
AESRMID1
14x17x210 mm
L'écarteur à joues Middeldorpf 1 doté d'une fenêtre est utilisé pour écarter les lambeaux mucopériostés, les joues, les lèvres ou la langue.



Écarteur Middeldorpf 2
AESRMID2
20x22x210 mm
L'écarteur à joues Middeldorpf 2 est utilisé pour retenir les lambeaux mucopériostés, les joues, les lèvres ou la langue.



Écarteur/écarteur à joues Langenbeck 1
AESRLAN1
30x16x210 mm

Tous les modèles sont compatibles avec une cassette chirurgicale



Écarteur/écarteur à joues Langenbeck 2
AESRLAN2
40x11x210 mm




Écarteur/écarteur à joues Langenbeck 3
AESRLAN3
50x11x210 mm

Les écarteurs American Eagle sont fabriqués en acier chirurgical pour un nettoyage et une préparation efficaces. Les modèles dotés d'un anneau de maintien ont été spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement aux cassettes chirurgicales American Eagle correspondantes. Ils peuvent être traités dans la cassette fermée, avec les autres instruments.

L'écarteur à joues / écarteur Langenbeck est utilisé pour l'écartement des lambeaux mucopériostés, des joues, des lèvres ou de la langue.


Écarteurs

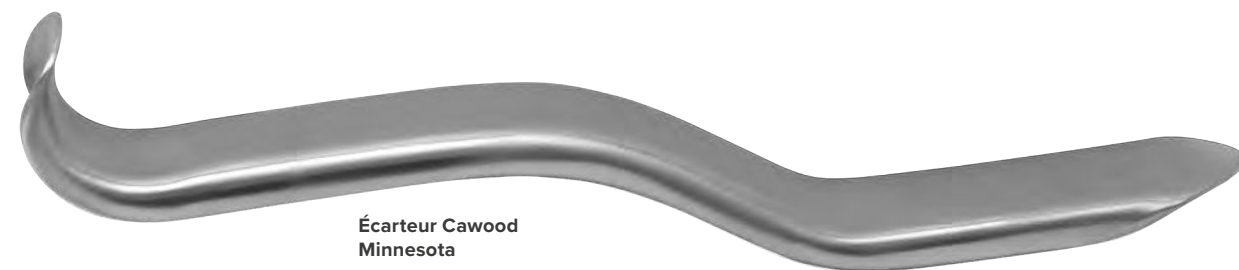

**Écarteur Cawood
Minnesota**

AESRCW


L'écarteur Cawood-Minnesota a été spécialement conçu pour répondre à un grand nombre d'exigences en chirurgie dentaire : pour l'écartement des lambeaux mucopériostés, des joues, des lèvres ou de la langue.

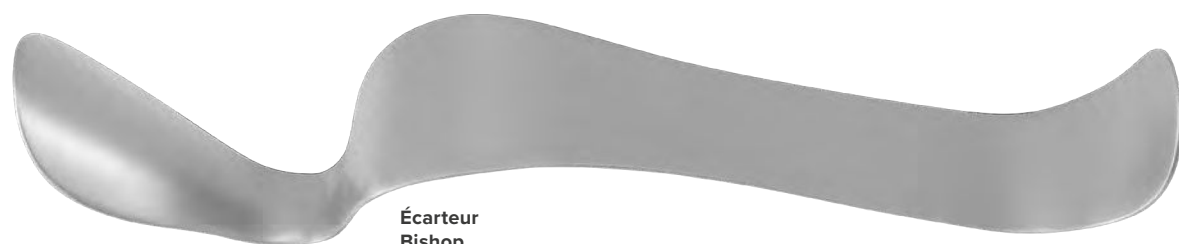

**Écarteur
Bishop**

AESRB

L'écarteur/reteneur Bishop a été spécialement conçu pour répondre à une multitude d'exigences en chirurgie dentaire et suit idéalement l'anatomie orale : pour retenir les lambeaux mucopériostés, les joues, les lèvres ou la langue.

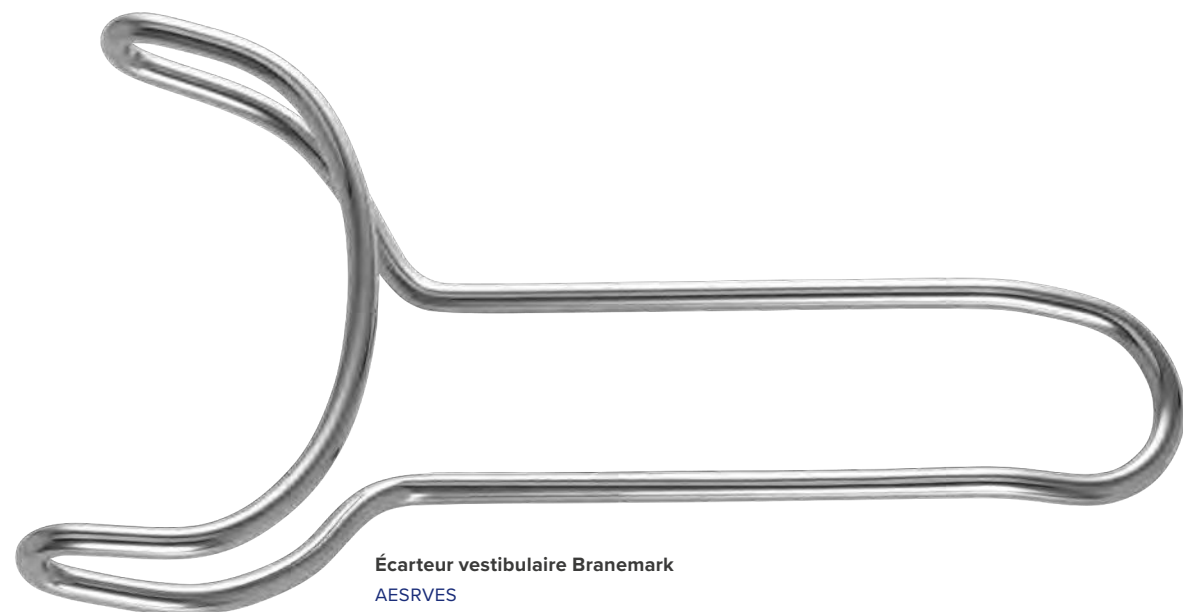


Écarteur vestibulaire Branemark

AESRVES

L'écarteur Branemark, également appelé rétracteur d'implants Branemark, assure un champ opératoire dégagé et bien accessible.

Matériaux d'affûtage

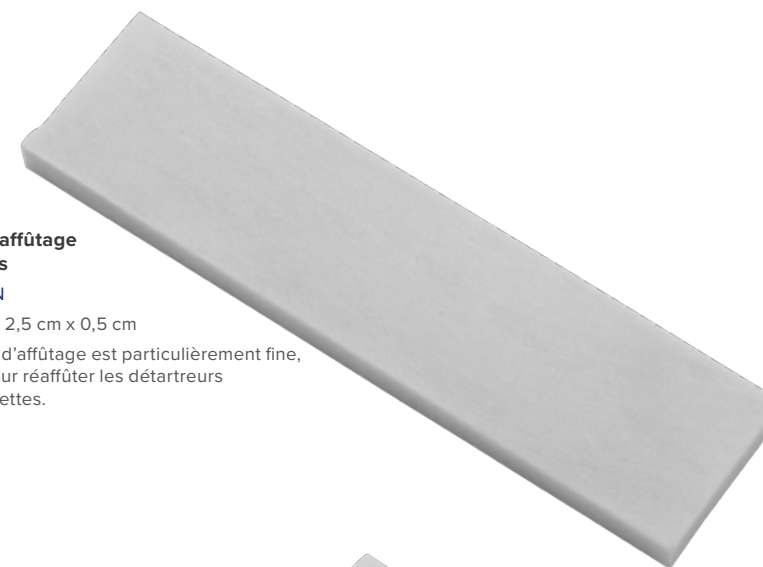


**Pierre d'affûtage
Arkansas**

AESSTN

10,2 cm x 2,5 cm x 0,5 cm

La pierre d'affûtage est particulièrement fine, idéale pour réaffûter les détartrés et les curettes.

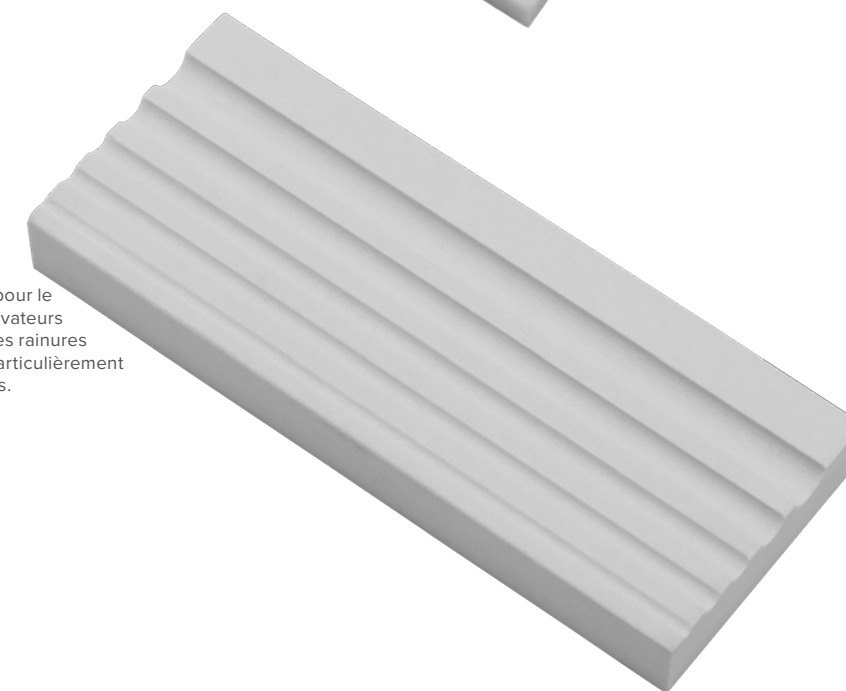


Pierre d'affûtage chirurgicale Arkansas

AESSSURG

10,1 cm x 4 cm x 1,2 cm

La pierre d'affûtage est particulièrement fine, idéale pour le réaffûtage d'instruments chirurgicaux tels que les élévateurs radiculaires, les curettes à os, les ciseaux à os, etc. Les rainures intégrées facilitent l'exécution correcte. La rainure particulièrement fine convient parfaitement au à l'affûtage des curettes.

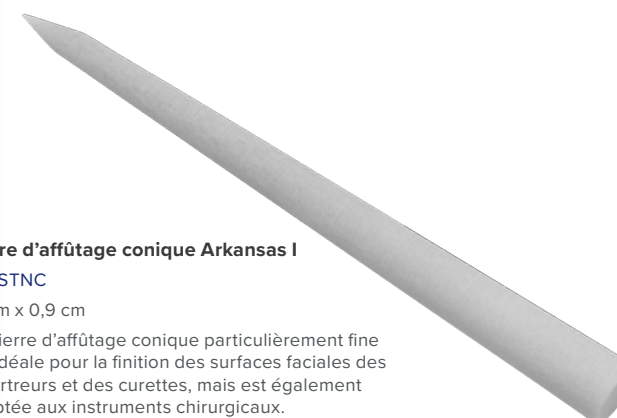

Pierre d'affûtage conique Arkansas I

AESSTNC



10 cm x 0,9 cm

La pierre d'affûtage conique particulièrement fine est idéale pour la finition des surfaces faciales des détartrés et des curettes, mais est également adaptée aux instruments chirurgicaux.



La pierre naturelle d'Arkansas se distingue par sa faible abrasivité, ce qui permet un enlèvement minimal de matière. Celle-ci doit toujours être utilisée avec une huile d'affûtage appropriée.

Daviers


Daviers

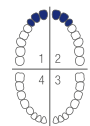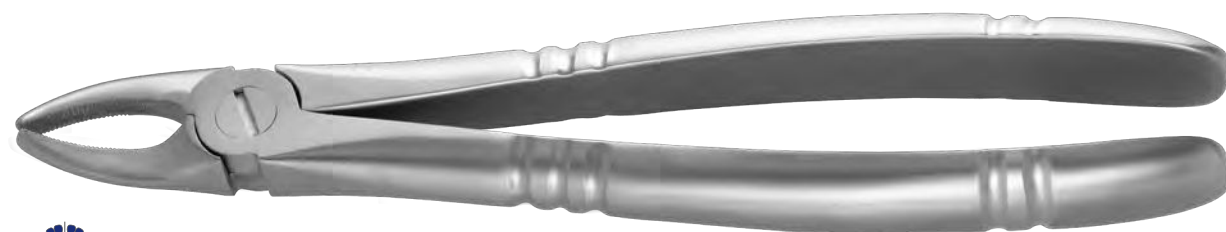


Pince d'extraction #2
AESEFCUI
Pour les incisives et les canines supérieures

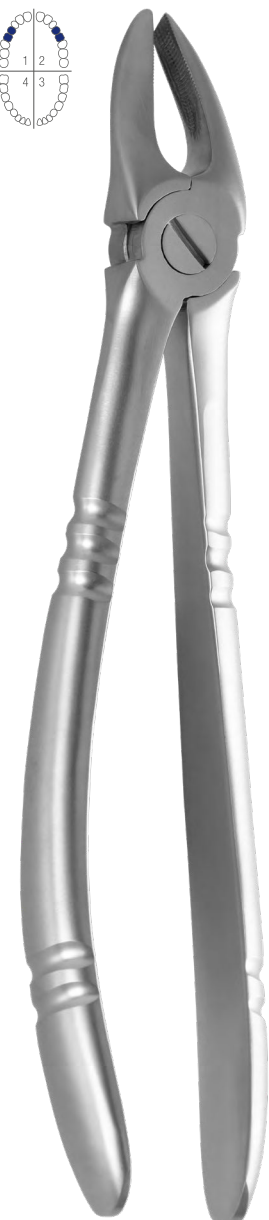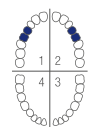


Pince d'extraction #7
AESEFCUP
Pour les prémolaires supérieures

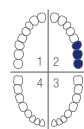


Pince d'extraction #17
AESEFCURM
Pour les molaires supérieures droites

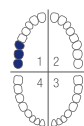

Pince d'extraction #18
AESEFCULM
Pour les molaires supérieures gauches

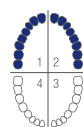


Pince d'extraction #51A
AESEFCUR
Pour les racines supérieures

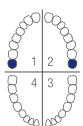


Pince d'extraction #67A
AESEFCU3M
Pour les dents de sagesse supérieures






Pince d'extraction #13
AESEFCLI
Pour les incisives, les canines et les prémolaires inférieures

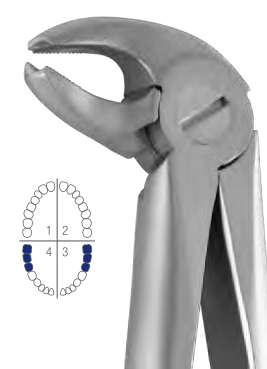

Pince d'extraction #22
AESEFCLM
Pour les molaires inférieures

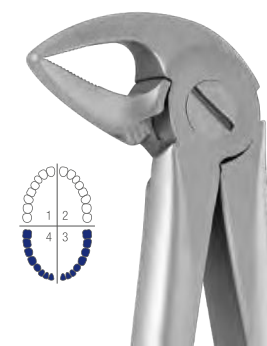

Pince d'extraction #33
AESEFCLR
Pour les racines inférieures

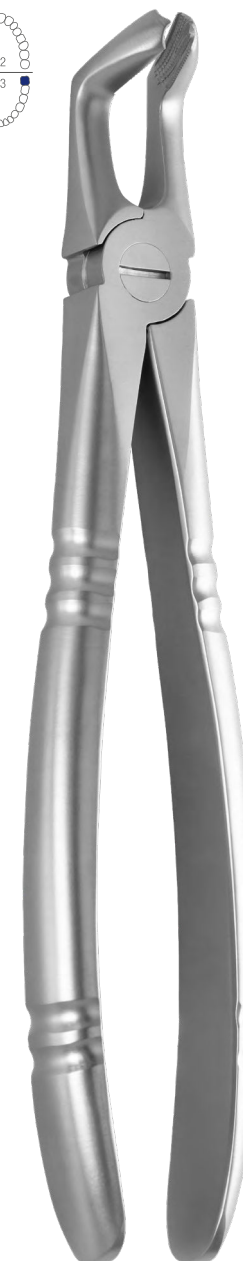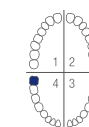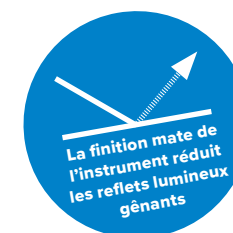



Pince d'extraction #79
AESEFCL3M
Pour les dents de sagesse inférieures

Également disponible en kit, comprenant les 10 pinces d'extraction :



Kit de pinces d'extraction
AESEFSET
10 daviers pour tous les quadrants





Daviers à préhension profonde

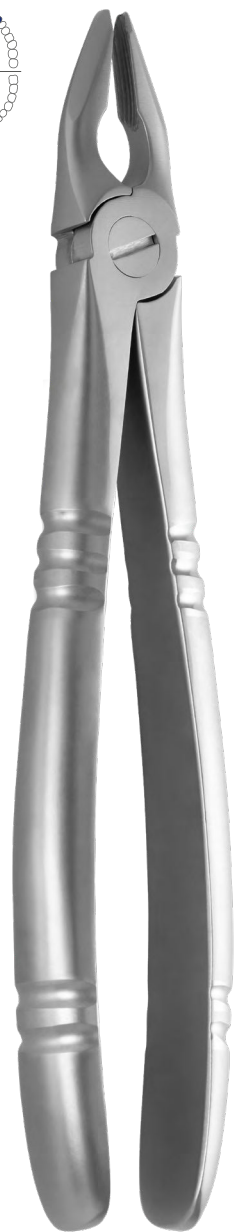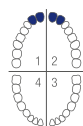


Pince d'extraction profonde
AESEFUI
Pour les incisives supérieures

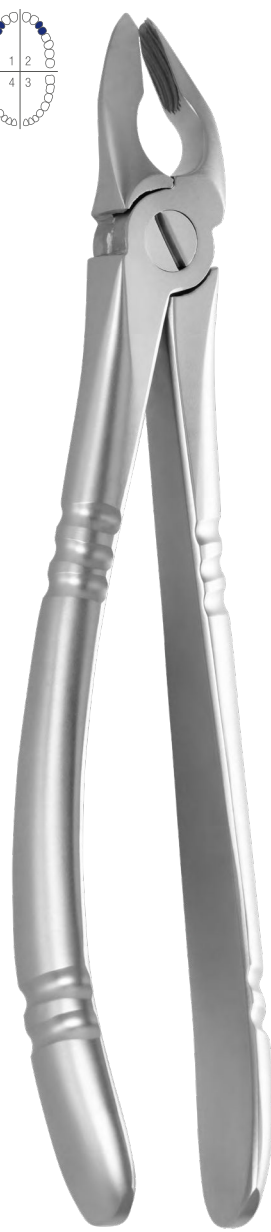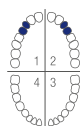



Pince d'extraction profonde
AESEFUC
Pour les prémolaires supérieures.

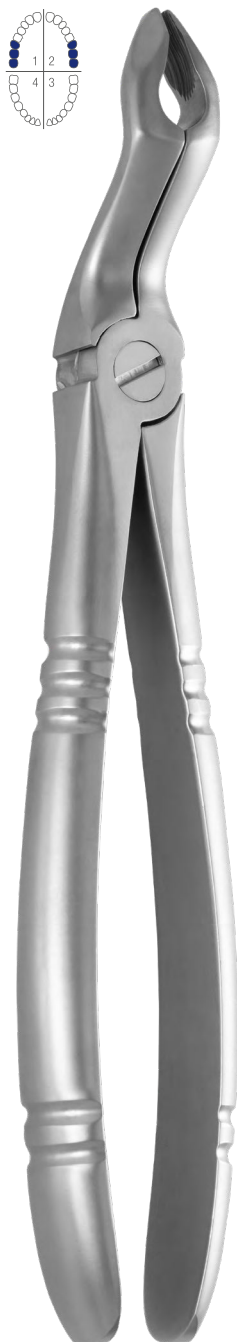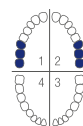


Pince d'extraction profonde
AESEFUM
Pour les molaires supérieures dents de sagesse

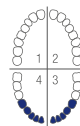

Pince d'extraction profonde
AESEFLCP
Pour les incisives, les canines et les prémolaires inférieures

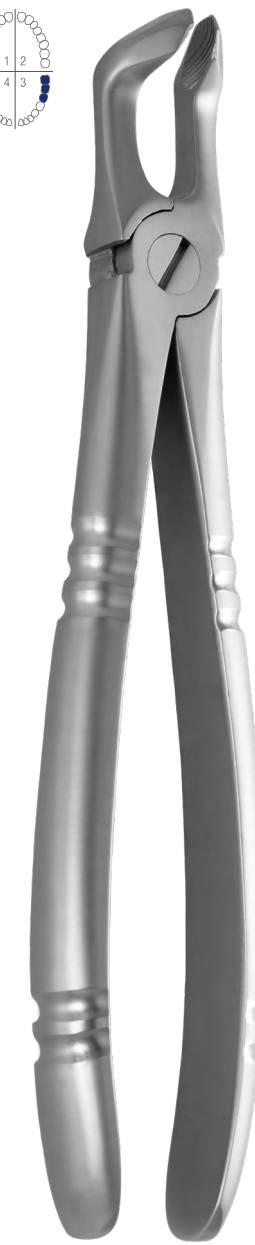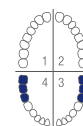

Pince d'extraction profonde
AESEFLM
Pour les molaires et dents de sagesse inférieures

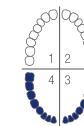

Pince d'extraction profonde
AESEFR
Pour les racines inférieures et dents antérieures étroites




Les daviers à préhension profonde sont dotés de mors allongés, légèrement affûtés et effilés vers l'extrémité. Ils permettent un positionnement sous-gingival et répartissent la pression sur une surface plus large de la structure coronaire et radiculaire, souvent fragilisée.

Pince à racine / fragments radiculaires

Pince à racine / fragments radiculaires



Meilleur accès grâce à un bec étroit

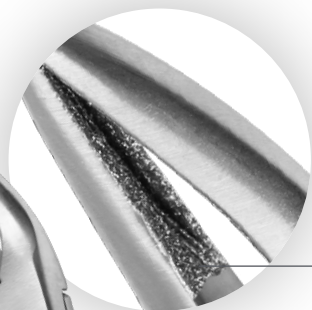


Meilleure prise grâce au revêtement diamanté de la mâchoire



Réduction de la réflexion de la lumière grâce à la surface mate

Manipulation aisée : manche au poids optimisé


Witzel,
Pince universelle à racines/
pointes de racines/extraction
AESEFRW
diamantée

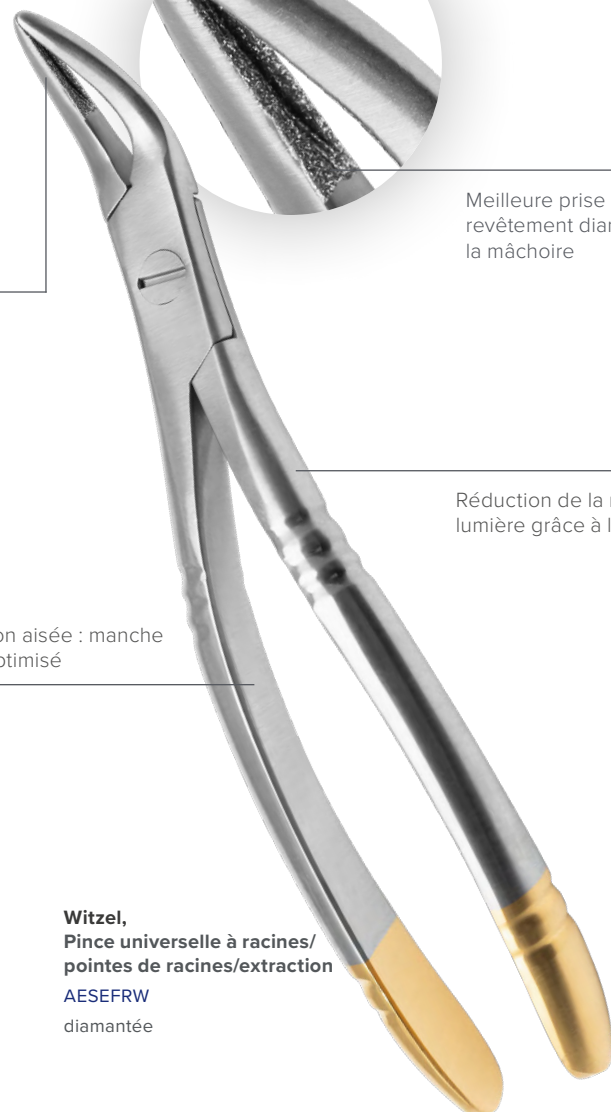


Les pinces à racine sont dotées de mors spécialement affûtés, assurant une préhension ferme et sûre des fragments radiculaires profondément logés dans l'alvéole.

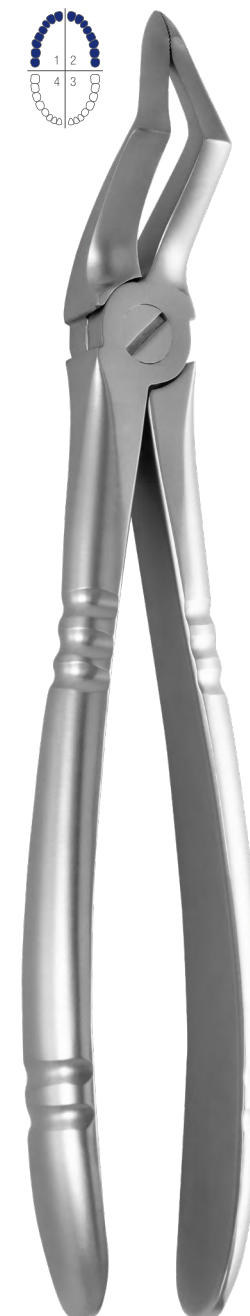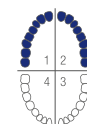

**Pince à racine résiduelle
maxillaire**
AESRFUP

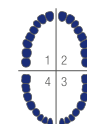

**Pince universelle à racine
résiduelle**
AESRFLO

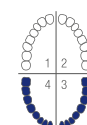

**Pince à racine résiduelle
mandibulaire**
AESRFUN



**Pince Stieglitz à pointes
de racine**
AESRFST
diamantée, droite




**Pince Stieglitz à pointes
de racine**
AESRFSTA
diamantée, courbée

Pince à racines adaptées au maxillaire et à la mandibule. Le manche allégé offre un confort maximal et une excellente maniabilité, tout en facilitant le nettoyage grâce à sa surface lisse. La finition mate du manche réduit les reflets lumineux gênants et le disque en téflon intégré au mécanisme de fermeture garantit une utilisation fluide et une longévité pratiquement sans entretien.

Périotomes

Les élévateurs apicaux de Heidbrink sont employés pour retirer les restes de racines. Leurs extrémités actives allongées permettent un meilleur accès à l'alvéole.

L'élévateur apical est conçu pour retirer les fragments radiculaires les plus fins. Les extrémités actives, durcies et allongées, assurent un meilleur accès à l'alvéole. Il est doté d'un manche ergonomique pour une transmission de force contrôlée.

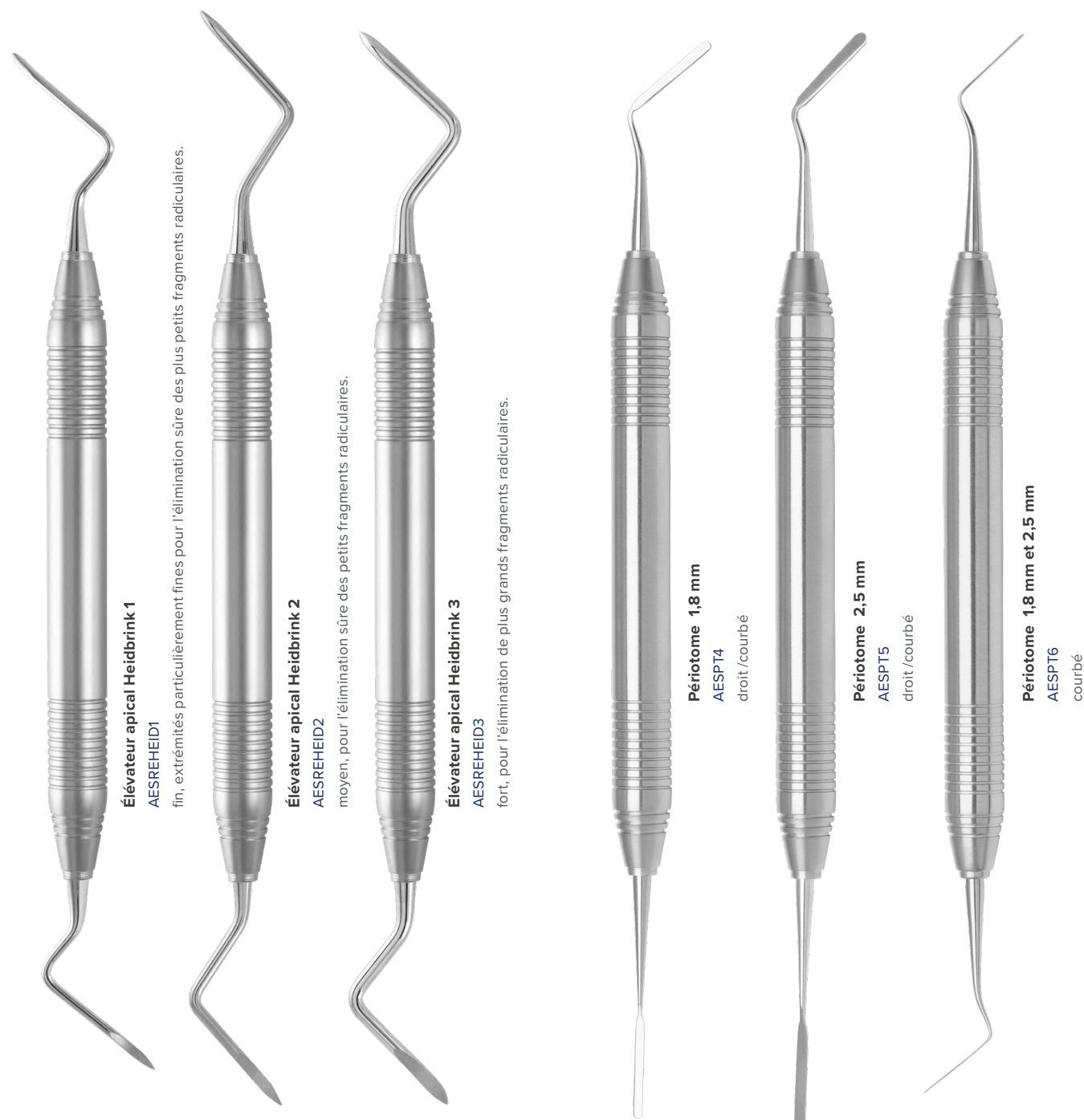


Les périotomes permettent une extraction atraumatique, aussi douce que possible, notamment avant la pose planifiée d'implant. Les tranchants particulièrement fins et élancés permettent la section précise du ligament parodontal avant l'extraction proprement dite, réalisée à l'aide d'un élévateur ou d'un davier. Les stries du manche, faciles à nettoyer, garantissent une excellente prise en main et une transmission optimale de la force. La surface mate du manche réduit les reflets lumineux gênants.

Périotomes PerioLUX

Les élévateurs apicaux American Eagle ont été conçus pour une extraction aussi douce que possible. Les instruments PerioLUX sont destinés à une utilisation axiale, avec une prise en main de type crayon, permettant une transmission directe et contrôlée de la force pour une précision maximale. Les structures osseuses adjacentes sont ainsi préservées autant que possible, ce qui contribue à éviter les fractures dentaires ou radiculaires. Les manches sont ergonomiques et offrent un retour tactile direct.

Les instruments PerioLUX ne sont PAS adaptés à l'effet de levier !

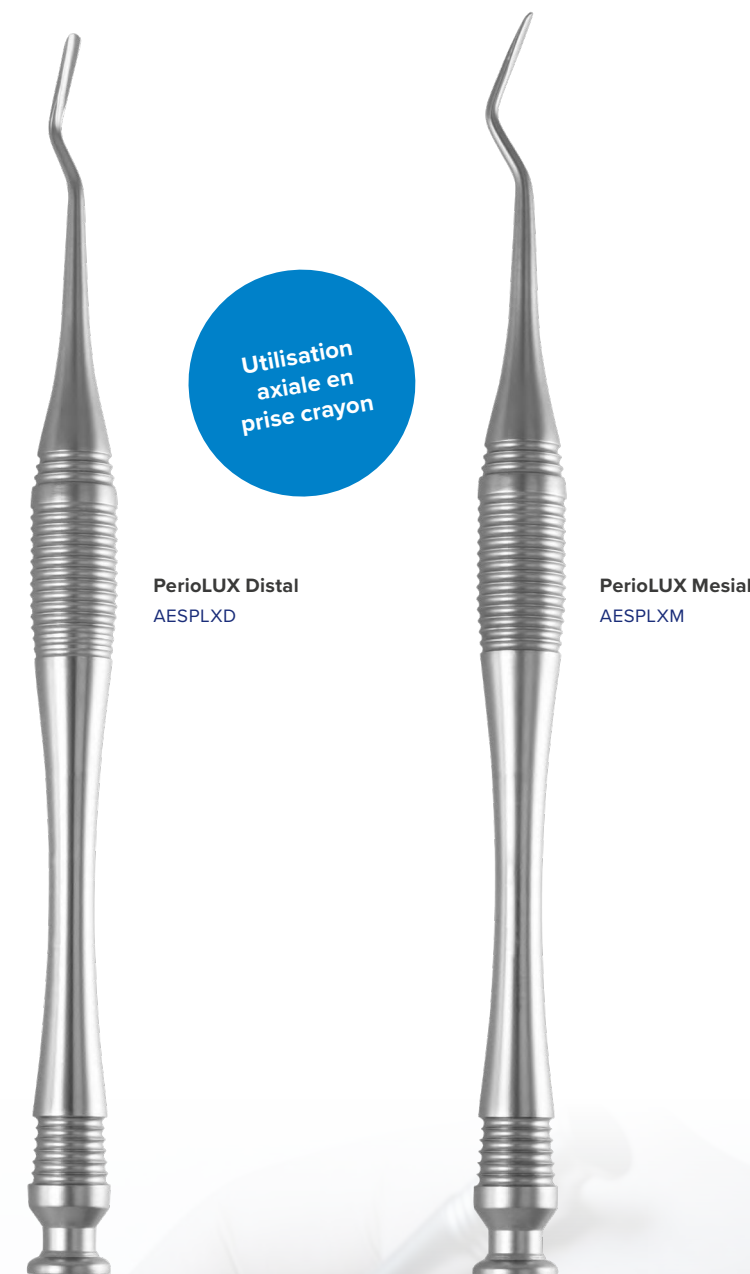

Élévateur radiculaires LiftaLUX

Les élévateurs LiftaLUX ont été conçus pour une extraction aussi atraumatique que possible. Ils possèdent des extrémités actives particulièrement fines, guidées axialement vers l'apex radiculaire. Cette approche délicate est complétée par un manche ergonomique en acier inoxydable, facile à nettoyer.

Les instruments
LiftaLUX
ne sont pas
conçus aux
mouvements de
levier !

Élévateur /
Élévateur de
racines LiftaLUX
AESRES3
droit, 3 mm



Élévateur /
Élévateur de
racines LiftaLUX
AESRES4
droit, 4 mm



Élévateur /
Élévateur de
racines LiftaLUX
AESREC3
courbé, 3 mm



Élévateur /
Élévateur de
racines LiftaLUX
AESREC4
courbé, 4 mm



Élévateur radiculaires TwistaLUX

Les élévateurs TwistaLUX ont été conçus pour les applications de levier ou de rotation. Ils sont dotés d'extrémités actives plus robustes, capables de transmettre des forces importantes sans risque de rupture ou de déformation. Ils disposent également d'un manche ergonomique en acier inoxydable facile à nettoyer.

Les instruments
TwistaLUX
sont adaptés aux
mouvements de
levier !

Élévateur Twista-
LUX / Élévateur
radiculaire
AESRETS3
droit, 3 mm




Élévateur Twista-
LUX / Élévateur
radiculaire
AESRETS4
droit, 4 mm



Élévateur Twista-
LUX / Élévateur
radiculaire
AESRETC3
courbé, 3 mm




Élévateur Twista-
LUX / Élévateur
radiculaire
AESRETC4
courbé, 4 mm

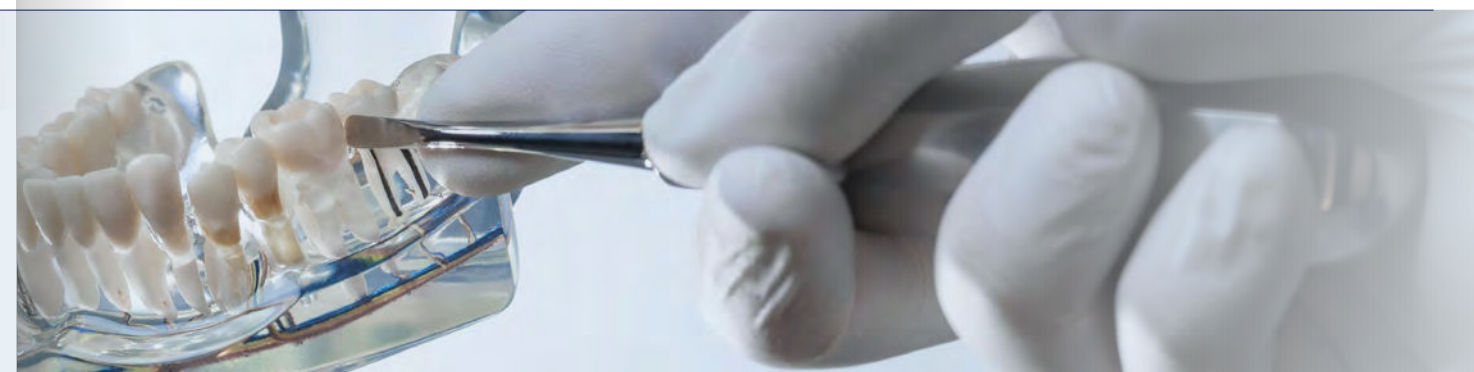

Cassettes à instruments

Cassettes à instruments


Des clips supplémentaires sont disponibles pour les instruments à charnière, afin de créer une configuration personnalisée.

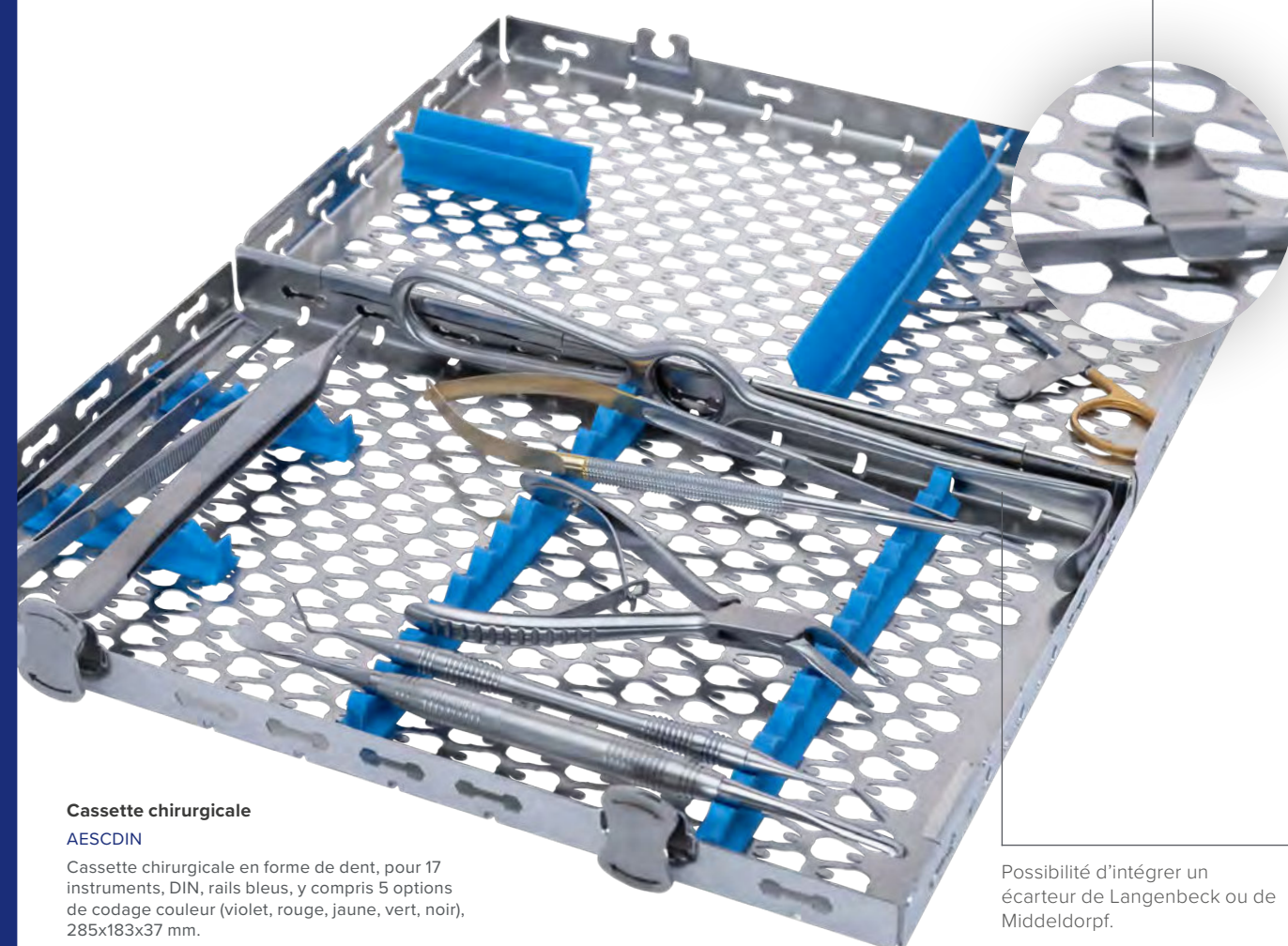


Cassette chirurgicale
AESCDIN

Cassette chirurgicale en forme de dent, pour 17 instruments, DIN, rails bleus, y compris 5 options de codage couleur (violet, rouge, jaune, vert, noir), 285x183x37 mm.

Possibilité d'intégrer un écarteur de Langenbeck ou de Middeldorpf.

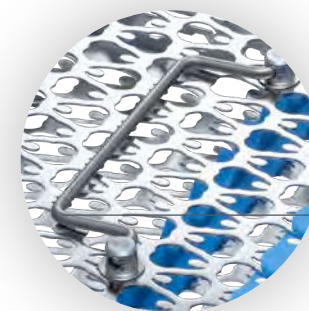

Poignée pratique intégrée au couvercle pour une insertion aisée dans le conteneur de stérilisation.

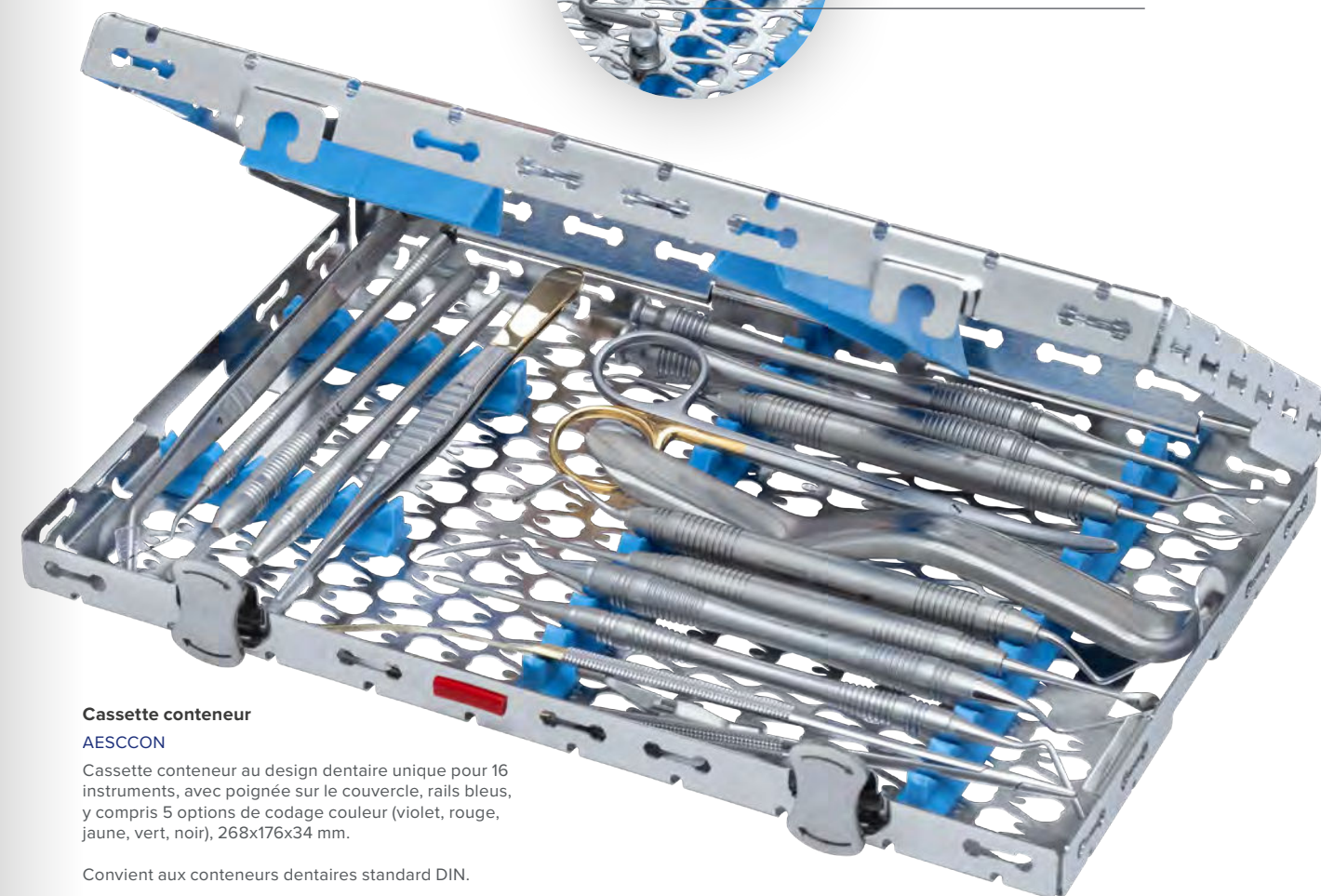

Cassette conteneur
AESCCON

Cassette conteneur au design dentaire unique pour 16 instruments, avec poignée sur le couvercle, rails bleus, y compris 5 options de codage couleur (violet, rouge, jaune, vert, noir), 268x176x34 mm.

Convient aux conteneurs dentaires standard DIN.

Les cassettes GALAXIE pour le retraitement des instruments sont ergonomiques et protègent vos instruments de haute qualité. Elles peuvent être organisées de manière personnalisée et complétées grâce à des rails de rétention supplémentaires.

XP² – THE NEXT GENERATION OF SHARPNESS AND LONGEVITY

The Future of Scaling is Golden



Learn
more!



YOUNG[®] INNOVATIONS

 Microbrush[®]
International

 dry
tips[®]

 YOUNG[®]
DENTAL

 ZOOBY[®]

 American Eagle[®]
INSTRUMENTS[®]

 GALAXIE
cassettes

 Pro-Matrix[®]

 Pro-Tip[®] TURBO

 CRYSTALTIP[®]

 inSafe

Young Innovations Europe GmbH
Mittermaierstraße 31 | 69115 Heidelberg | Allemagne
DE: +49 (0) 6221 4345442 | info@ydnt.eu
www.am-eagle.eu

AE-FR-SUR/0626