


American Eagle INSTRUMENTS®

M5 RESTORATIVE SERIES

De M5 Restorative Series instrumenten van American Eagle werd gecreëerd in samenwerking met Dr. Anthony Mak, DDS. Deze kit bevat vijf unieke restauratieve instrumenten gecreëerd volgens de door American Eagle gepatenteerde technologie die een gladder, niet-klevend oppervlak bieden en waarmee klinici 90% van hun procedures kunnen uitvoeren.

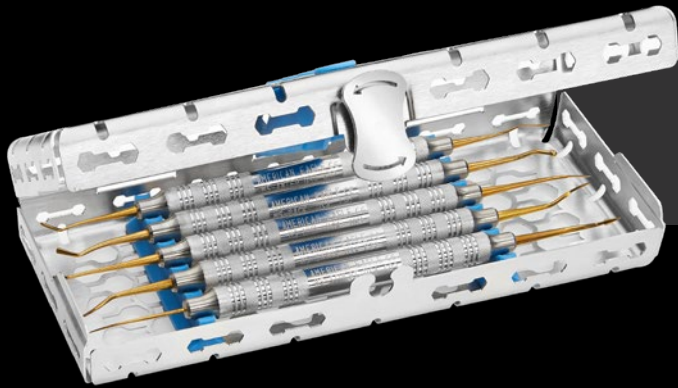

Voldoet aan de behoeften van

90%

van de procedures


M5 Restorative Series in 1/4 DIN cassette
Cassette is apart verkrijgbaar

Dankzij de XP Technology® -coating beschikken alle instrumenten over een glad, niet-klevend oppervlak en behouden de carver en scherpe lepel hun scherpheid. De instrumenten die moeten snijden, snijden... en de instrumenten die glad moeten zijn en moeten sculpteren, zijn niet-klevend.

Dr. Anthony Mak, DDS



WELKE INSTRUMENTEN MAKEN DEEL UIT VAN DE **M5 RESTORATIVE SERIES**?

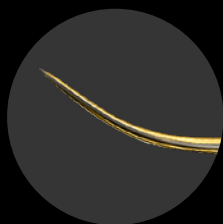

DG Explorer: lang en spits om overtollig materiaal langs de randen te verwijderen. De langere punt werkt goed bij het aanbrengen van lagen in diepe caviteiten




M5-SCULPT

ITEM #: M5-SCULPT

VOOR AFWERKING EN REINIGING

Universeel instrument dat wordt gebruikt voor verfijnde composietaanbrenging bij anterieure (incisale anatomie/mamelons) en posterieure (cuspale hellingen) tanden. XP Technology voor Non-Stick.

Acorn: creëert de cuspale helling op de posterieure tand of de mamelons op de anterieure tand (inclusief verschillende kleuren aanbrengen)

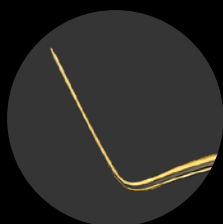

M5-ANTERIOR

ITEM #: M5-ANTER

VOOR HET PLAATSEN EN SCULPTEREN VAN KLASSE IV FINEERCOMPOSIT

Zeer dunne interproximaal carver voor toegang tot smalle interproximale en gingivale gebieden. Flexibel voor aanpassing aan krommingen van de tand. Voor fineren is het lemmet lang genoeg voor de gehele lengte van de tand.



M5-PACK

ITEM #: M5-PACK

VOOR HET AANBRENGEN EN VULLEN VAN COMPOSIT

Omvat een bolvormig uiteinde en een plugger met een plat uiteinde. De composiet rolt niet over de plugger zoals bij een bolvormige burnisher. Het perfecte instrument om een grote hoeveelheid composiet aan te brengen, bij gebruik van alleen een bolvormige burnisher kunnen holtes ontstaan.




M5-CARVE

ITEM #: M5-CARVE

VOOR HET VERWIJDEREN VAN INTERPROXIMAAL COMPOSITMATERIAAL

Sterke, onbreekbare lemmeten zijn 25% dunner om toegang te krijgen tot interproximale flash-zones zonder het contact te verbreden. XP Technology voorkomt dat de lemmeten bij herhaald gebruik bot worden, zodat u makkelijk composietmateriaal kunt blijven verwijderen en snijden. De lemmeten zijn met ergonomische hoeken ontworpen voor vlotte toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.

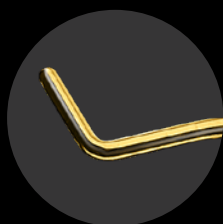

M5-MINI

ITEM #: M5-MINI

VOOR HET VULLEN EN AANBRENGEN VAN COMPOSIT

Korte, fijne spatula voor een betere controle op moeilijk bereikbare plaatsen en een plugger van 1 mm is ideaal voor het vullen van composiet in kleine posterieure ruimtes of moeilijk te vullen anterieure tanden.

